


Menos tensión más tranquilidad

Tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe y botellas de disolvente

Los “pequeños detalles” de su flujo de trabajo también influyen notablemente en la calidad de los resultados. Precisamente por eso, es un placer poder presentarle las tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe y una nueva gama de botellas de disolvente. Estos innovadores productos forman parte de la familia InfinityLab de instrumentos, columnas y consumibles, y fomentan la eficiencia cromatográfica y la facilidad de uso.

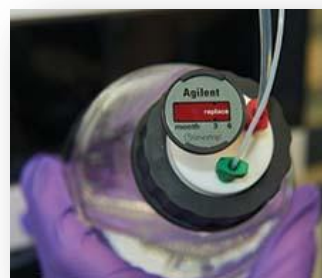

Las tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe:

- Evitan que los disolventes se filtren al aire.
- Incrementan la uniformidad de la fase móvil a largo plazo
- Aumentan y mantienen de forma asequible la seguridad en el laboratorio.
- Son fáciles de instalar.

Nada es más importante que minimizar la exposición

El acetonitrilo y el metanol son solo dos de los numerosos compuestos tóxicos a los que puede verse expuesto a diario. Afortunadamente, puede confiar en las tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe para evitar que los disolventes se filtren al aire.

Las tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe mejoran la uniformidad de la fase móvil

Con el paso del tiempo, la densidad del disolvente puede cambiar y eso puede afectar a los resultados cromatográficos. Este problema se evita al almacenar los disolventes con tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe herméticas, lo que garantiza la uniformidad a largo plazo tanto de la fase móvil como de los resultados cromatográficos. Las tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe incluyen un lector de tiempo que le indica cuándo es necesario sustituir la válvula de venteo. Recomendamos cambiar la válvula de venteo InfinityLab o el filtro de carbón InfinityLab tras 6 meses de uso en las siguientes condiciones:

- 1 ml/min
- 8 horas al día
- 5 días a la semana
- En condiciones típicas de laboratorio a 20 °C

Práctico y económico

Las tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe se instalan con facilidad, igual que las tapas estándar, y proporcionan un modo sencillo y asequible de aumentar y mantener la seguridad en el laboratorio.



Botellas de disolvente más seguras para el laboratorio

Las nuevas botellas de disolvente de Agilent se han rediseñado para aumentar su facilidad de uso y para una manipulación más segura, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes en el laboratorio. Las nuevas botellas de disolvente cuentan con un diseño ergonómico, un perfil más delgado y zonas de agarre con forma ergonómica en ambos lados de la botella, para facilitar y hacer más seguro su uso. Gracias a una zona de etiquetado predefinida, compatible con las etiquetas de botellas autoadhesivas, que se mantienen sobre la botella mientras se necesita, y a unos anillos de silicona de colores, podrá identificar de manera clara y sin ambigüedad las composiciones de los disolventes. Un diseño de

impresión blanco de cerámica, duradero y fácil de leer, indica con claridad el volumen nominal de la botella y permite determinar rápidamente el contenido restante de la botella.

Diseñado para la serie de LC Agilent InfinityLab

El nuevo diseño es compatible con la serie de LC InfinityLab, y se puede incorporar sin problemas a su flujo de trabajo de LC. Estas ventajas adicionales mejorarán su eficiencia operativa diaria en el laboratorio.



Especificaciones:

Tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe

Referencia	Descripción	Conectores	Puertos		
			Venti- lación	Filtro	Desecho
5043-1217 	GL45 con 1 puerto 1 válvula de venteo con lector de tiempo (5043-1190)	1 x 3,2 mm	1		
5043-1218 	GL45 con 2 puertos 1 válvula de venteo con lector de tiempo (5043-1190)	2 x 3,2 mm	1		
5043-1219 	GL45 con 3 puertos 1 válvula de venteo con lector de tiempo (5043-1190)	3 x 3,2 mm	1		
5043-1220	GL45 con 4 puertos 1 tubo flexible para fugas	4 (2 x 3,2 mm, 1 x 2,3 mm y 1 x 1,6 mm)		1	1

Botellas de disolvente

Referencia	Descripción
9301-6523	Botella de disolvente, transparente, 500 ml, con tapón
9301-6524	Botella de disolvente, transparente, 1.000 ml
9301-6525	Botella de disolvente, ámbar, 500 ml, con tapón
9301-6526	Botella de disolvente, transparente, 1.000 ml
9301-6527	Botella de disolvente, transparente, 125 ml
9301-6528	Botella de disolvente, transparente, 100 ml, con tapón
9301-6529	Anillo de silicona de identificación, (8/paquete con 4 colores diferentes)
9301-6530	Adhesivos, para botellas de disolvente, (100/paquete)

Kits

Referencia	Descripción
5043-1221	Depósito de residuos de 6 litros (5043-1196) Tapa de disolvente InfinityLab Stay Safe GL45 con 4 puertos (5043-1220)

Para los puertos de conectores

Referencia	Descripción
5043-1216	Conector para tubos de 3,2 mm, PFA, 2/paq.
5043-1215	Conector para tubos de 2,3 mm, PFA, 2/paq.
5043-1214	Conector para tubos de 1,6 mm, PFA, 2/paq.
5043-1198	Tapón roscado, 1/8 pulgadas, PTFE, 2/paq.

Para puerto de venteo

Referencia	Descripción
5043-1190	Válvula de venteo con lector de tiempo, PTFE, 1 µm

Para el puerto del filtro

Referencia	Descripción
5043-1193	Filtro de carbón con lector de tiempo (58 g) para el depósito de residuos

Para el puerto de residuos

Referencia	Descripción
5043-1207	Colector de residuos de 2 puertos, PTFE

Varios

Referencia	Descripción
5043-1191	Adaptador de rosca de PTFE, GL45 (M) - GL40 (H)
5043-1192	Adaptador de rosca de PTFE GL45(M) - GPI 38-430 (H)

Gracias a un diseño innovador, las tapas de disolvente InfinityLab Stay Safe pueden evitar que los disolventes se filtren al aire, protegiendo tanto a sus compañeros como a usted.

Mejore las jornadas de trabajo en su laboratorio gracias a los consumibles Agilent InfinityLab

Saque el máximo partido a la serie de LC Agilent InfinityLab (y a su flujo de trabajo en cromatografía) con los consumibles Agilent InfinityLab, que le proporcionan comodidad, sencillez y una mayor eficiencia.

Conectores Agilent InfinityLab: estables a más de 1.300 bar y reutilizables durante más de 200 análisis, permiten realizar conexiones de LC firmes en cuestión de segundos.

Los espacios de trabajo flexibles InfinityLab ofrecen un acceso sencillo a sus instrumentos de LC, botellas de disolvente y muchos otros elementos. También le facilitará cambiar la configuración de los instrumentos y acercar su sistema LC a su sistema MS.



Conector de conexión rápida InfinityLab y Conector de giro rápido InfinityLab



Espacio de trabajo flexible InfinityLab